


ZEIT FÜR **FLEXIBILITÄT**
TITANBASIS
PORTFOLIO




FÜR VERBESSERTE PROTHETISCHE VERSORGUNGEN


Die Titanbasis SSC Flex baut auf der hochmodernen ASC Flex auf und bringt unser Titanbasis Portfolio mit erweiterten Funktionen auf ein neues Niveau. Die Titanbasis besitzt einen geraden Schraubenkanal und bietet als rotierende oder rotationsgesicherte Komponente mehr Flexibilität bei der Versorgung mit Einzelkronen und Brücken. Das innovative Design dieser Titanbasis beinhaltet mehrere Gingivahöhen; der höhere Kamin kann auf die gewünschte Höhe gekürzt werden.

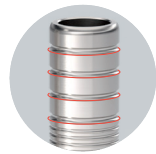


1. Variable Kaminhöhe
Der Kamin kann individuell von 8,0 mm auf 7,0, 6,0, 5,0 und 4,0 mm gekürzt werden.

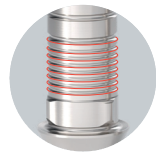

2. Rillendesign
Bis zu 30 % höhere Retention für eine verbesserte Stabilität der Krone ohne Sandstrahlen.

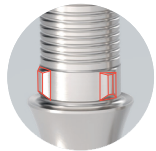

3. Rotationsschutz
Verhindert nicht gewünschte Rotationsbewegungen der Krone.

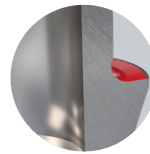

4. Konisches Schulterdesign
Die konisch zulaufende Plattform zur Aufnahme des Befestigungsmaterials verkleinert den Klebespalt im Übergangsbereich zur Gingiva.




5. Erhältlich in mehreren Gingivahöhen*
Gingivahöhen von 1,0 mm bis 3,0 mm für mehr Flexibilität.



6. Rotierende Version*
Für mehr Flexibilität bei Brücken- und Stegversorgungen.

FÜR HÖHERE FESTIGKEIT

Mit der neuen Titanbasis SSC Flex Molar präsentieren wir eine Erweiterung der innovativen SSC Flex Produktlinie*, die speziell für Kronen im Molarenbereich entwickelt wurde. Das innovative Design dieser Titanbasis beinhaltet mehrere Gingivahöhen und einen Kamin, der auf die gewünschte Höhe gekürzt werden kann. Die Titanbasis SSC Flex Molar ist mit allen gängigen Implantatverbindungen kompatibel und setzt neue Standards in der implantatprothetischen Versorgung.

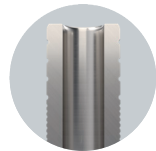

1. Dickere Wandstärke**
Für verbesserte Haltbarkeit.



2. Größerer Kamindurchmesser**
Speziell für Kronen im Molarenbereich.




3. Breitere Plattform**
Für eine stärkere Abstützung der Restauration.




FÜR ÄSTHETISCH ANSPRUCHSVOLLE FÄLLE

Das wegweisende Design der Titanbasis ASC Flex wurde speziell für abgewinkelte Schraubenkanäle entwickelt und eignet sich ideal für die Anforderungen von prothetischen Versorgungen in der ästhetischen Zone.

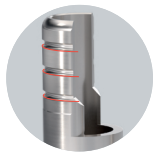


1. Variable Kaminhöhe
Der Kamin kann individuell von 6,5 mm auf 5,5, 4,5 und 3,5 mm gekürzt werden.

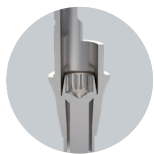

2. Schraubenkanal
Kompatibel mit abgewinkelten und geraden Schraubenkanälen.



3. Kugel-Torx Eindrehinstrument
Für Angulationen bis 25°. Für ein müheloses und zuverlässiges Anziehen der Schraube.

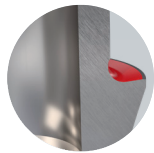

4. Konisches Schulterdesign
Die nach unten verjüngte Plattform zur Aufnahme des Befestigungsmaterials verkleinert den Klebespalt im Übergangsbereich zur Gingiva.



5. Erhältlich in mehreren Gingivahöhen*
Gingivahöhen von 1,0 mm bis 3,0 mm für mehr Flexibilität.




6. Rotierende Version*
Für mehr Flexibilität bei Brücken- und Stegversorgungen



FÜR KOMPLEXE PROTHETIKFÄLLE

Die Titanbasen auf Abutmentniveau von Medentika bieten eine hohe Designflexibilität für Zirkondioxid-Restaurationen. Sie sind mit geradem und abgewinkeltem Schraubenkanal oder im Flex-Design erhältlich, welches zusätzliche Flexibilität bietet, da die Länge des Kamins angepasst werden kann.

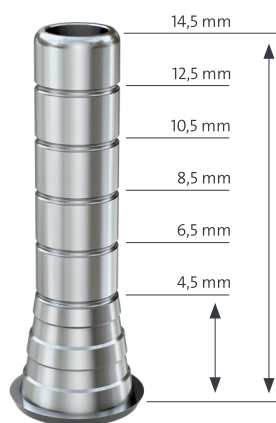

TITANKAPPE FLEX

Die Titankappe Flex bietet eine variable Kaminhöhe. Die Kaminhöhe 14,5 mm unterstützt auch hohe Restaurationen (für provisorische oder definitive Versorgungen) und kann zur Anpassung an die individuelle klinische Situation in 2 mm Schritten bis auf 4,5 mm gekürzt werden. Die unterschiedlichen Kaminhöhen sind in der CAD-Bibliothek hinterlegt.



TITANBASIS GERADE UND ASC

Bei einer ungünstigen Implantatposition oder einer Implantatposition in der ästhetischen Zone besteht die Möglichkeit, den Schraubenkanal in den nicht sichtbaren Bereich zu verlagern.



WEITERENTWICKELTE,
KOMPATIBLE PROTHETIK
KOMPONENTEN.

The Medentika logo, consisting of a stylized 'M' inside a circle.

MEDENTIKA®
A Straumann Group Brand

© MEDENTIKA® GmbH, 2024. Alle Rechte vorbehalten.

MEDENTIKA® und/oder andere in diesem Dokument erwähnte Marken und Logos von MEDENTIKA® sind Marken oder eingetragene Marken der MEDENTIKA® GmbH und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Hinweis: Die Bilder in dieser Broschüre wurden von einer KI generiert.

Ihr **Widerspruchsrecht**: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

Diese Broschüre dient zu Informationszwecken und ist für den Gebrauch in verschiedenen Ländern bestimmt. Jedes Land ist eigenverantwortlich für die Konformität des Inhaltes mit den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften zuständig.

HERSTELLER

MEDENTIKA® GmbH

Hammweg 810

76549 Hügelsheim

Deutschland

info@medentika.de

www.medentika.com

MEDENTICAL CARE GmbH

Pucheggerstraße 2

A-4844 Regau

www.medentical-care.at

Beratungs- und Bestellservice

Tel: +43(0)7672 22 530